

Intended Use

The DreamStation Cellular Modem is designed for use with select Philips Respironics therapy devices. Once installed, it automatically transfers data between the therapy device and Philips Respironics proprietary compliance software. The DreamStation Cellular Modem is able to receive oximetry data and transfer it to the therapy device.

Package Contents

DreamStation Cellular Modem

Warnings and Cautions

Warnings

- If you notice any unexplained changes in the performance of this device, if the device is dropped or mishandled, if water is spilled into the enclosure, or if the enclosure is broken, discontinue use and contact Philips Respironics for assistance.
- Repairs and adjustments must be performed by Philips Respironics-authorized service personnel only. Unauthorized service could cause injury, invalidate the warranty, or result in costly damage.
- To reduce the risk of bodily injury and damage to the equipment, retain and follow all product safety and operating instructions.
- The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six inches be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. The DreamStation Cellular Modem should be considered a wireless phone in this regard.
- If you use any other personal critical medical device, such as pacemaker, consult the manufacturer of your device to determine if it can co-exist in close proximity with our device in terms of RF interferences. Your physician may be able to assist you in obtaining this information
- Do not use this product in gas stations, fuel stores, chemical plants and locations containing explosives.
- Do not use accessories, detachable parts, and materials not described in the instructions for use.

Cautions




- Remove power from the therapy device by unplugging the power supply cord's connector from the power inlet on the back of the device before proceeding with the installation instructions.
- If the modem has been exposed to either very hot or very cold temperatures, allow it to adjust to room temperature before beginning the installation procedure.
- Pins of connectors should not be touched. Connections should not be made to these connectors unless ESD precautionary procedures are used. Precautionary procedures include methods to prevent build-up of electrostatic charge (e.g., air conditioning, humidification, conductive floor coverings, non-synthetic clothing), discharging one's body to the frame of the equipment or system or to earth or a large metal object, and bonding oneself by means of a wrist strap to the equipment or system or to earth.


Important! Refer to the therapy device manual for additional warnings and cautions.

Important! From time to time, electronic devices can be affected by irregularities in the electrical power supplies and other electrical equipment. To prevent electrical interference that could affect the performance of your medical

equipment, always keep accessories (power supplies, battery packs, etc.) and other electrical devices (telephones, radios, etc.) away from your CPAP when used with the cellular modem.

Symbols


Symbol	Definition
	Consult accompanying instructions
	This device contains an RF transmitter
IP22	Drip proof equipment
	Separate collection for electrical and electronic equipment per EC Directive 2012/19/EU

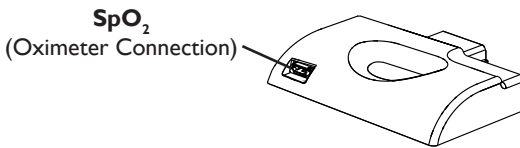

Installing the Modem


In order for the modem to work properly, it must be installed in a therapy device.

1. Ensure the therapy device is turned off.
2. Open the accessory door on the therapy device.

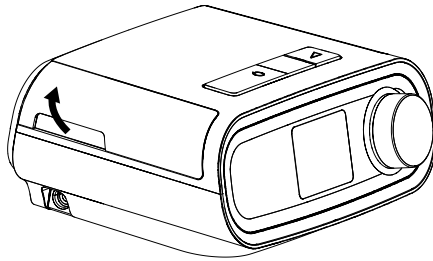


Open Accessory Door

3. Slide the modem into the accessory slot until it clicks into place.

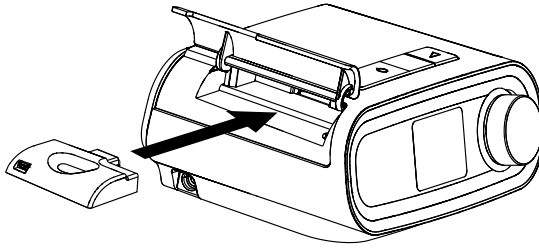

Slide Modem into Place

4. Close the accessory door on the therapy device.

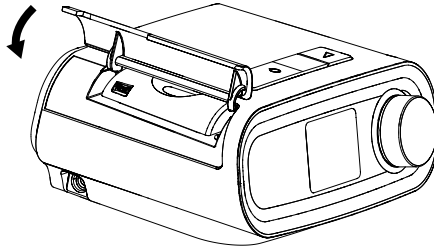

Close Accessory Door

Note: After powering on, up to 30 seconds may elapse before the modem is ready to make a call.

Important! The modem will automatically call within 5 minutes of installation if the blower is off and a manual call has not been successfully completed.


Making a Call

Normally, the modem will automatically make a call and upload therapy data at predetermined times set by your provider. The modem will not make a call while the blower is on and therapy device is delivering therapy.


If instructed to do so by your provider, you can manually make a call by navigating to the My Provider menu on the therapy device and selecting "Upload." The device will then display the animated Sending screen, then display that the upload was completed.



My Provider Screen

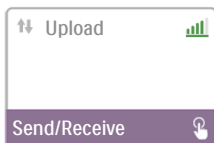

Upload Screen

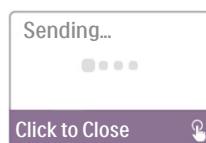

Animated Sending Screen



Upload Complete Screen

Note: When located near a clock radio, speaker, or other electronic device, an occasional buzzing noise may be heard. Relocate the therapy device and modem away from the electronic device to reduce or eliminate this noise.

Modem On/Off


If necessary, you may turn the modem off temporarily by navigating to the My Setup menu and selecting “Modem Off.” The modem will not be able to make any calls while off, and an airplane icon will appear on the upload screen. When you are ready to turn the modem back on, navigate to the My Setup menu and select “Modem On.”



My Setup Screen



Modem Off Icon

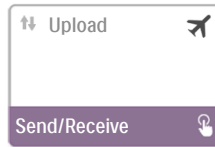


Upload Screen when Modem is Off



Modem On Icon

Error Messages

If a connection or upload attempt fails, an error message will be displayed on the therapy device screen indicating the error number.

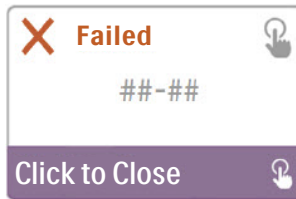

Example of an Error Message


Number	Displayed Text	Meaning	Action
1-0 1-1	Carrier Network Issue	Connection Error	Try removing power from the therapy device by unplugging the power supply cord's connector from the power inlet on the side of the device, wait 10 seconds, then plug the cord in again. The, try initiating a manual call by navigating to the My Provider menu on the therapy device and selecting “Upload.” See the “Making a Call” section of this guide. If problem persists, contact your provider. The provider should check the Philips Respironics proprietary compliance software for additional information.
1-2 1-3 1-4	Call Again Later		
2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5	Call Again Later		

Number	Displayed Text	Meaning	Action
3-0	Call Product Support	Software Configuration Error	Try initiating a manual call by navigating to the My Provider menu on the therapy device and selecting "Upload." See the "Making a Call" section of this guide. If problem persists, contact your provider. The provider should check the Philips Respironics proprietary compliance software for additional information.
3-1	Check Enore Setup		
3-2	Call Again Later		
4-0 4-1 4-2 4-3	Modem Service Required	Invalid Device Configuration Error	Contact your provider. The provider should check the Philips Respironics proprietary compliance software for additional information.

Note: Philips Respironics proprietary compliance software is developed by Philips Respironics and is intended for use by physicians and home care providers.


Removing the Modem

1. Ensure the therapy device is turned off.
2. Open the accessory door on the therapy device.

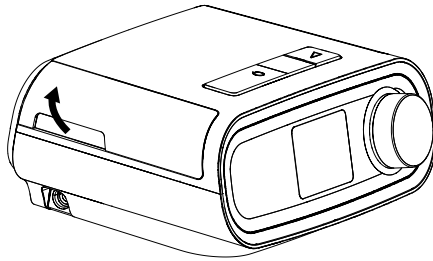

Open Accessory Door

3. Gently, pull the modem out of the therapy device.

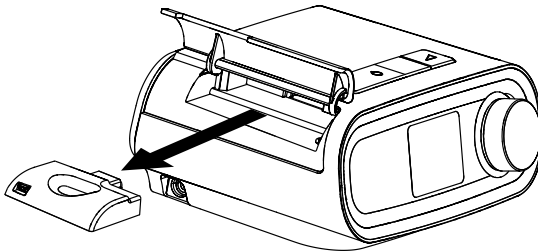

Remove the Modem

4. Close the accessory door on the therapy device.

Temperature and Storage Information

	Operation	Transport & Storage
Temperature:	41° to 95° F (5° to 35° C)	-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Humidity:	15% to 95% non-condensing	15% to 95% non-condensing

Disposal

Separate collection for electrical and electronic equipment per EC Directive 2012/19/EU. Dispose of this device in accordance with local regulations.

Additional Notices

- Notice:** The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 30 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Notice:** For regulatory identification purposes, the DreamStation Cellular Modem is assigned a model number of 200650C or 100650C.
- Notice:** There are no user-serviceable parts within the cellular modem accessory.
- Notice:** The cellular modem is not suitable for use on airlines.
- Notice:** Use of non-original manufacturer-approved accessories may violate your local RF exposure guidelines and should be avoided.

Hereby, Respiration Inc. declares that this class 1 radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://incenter.medical.philips.com/PMSPublic>

Product Support

Should you experience trouble with this equipment or require assistance setting up, using, or maintaining the equipment, contact your home care provider or Philips Respiration at 1-800-345-6443 or 1-724-387-4000.

Specifications

- The cellular modem has an expected service life of 5 years.
- Not all bands are supported by local carriers.
- Mode of Operation: Continuous

Radio Specifications

Band DCS1800:

Tx Uplink: 1710-1785 MHz
Rx Downlink: 1805-1880 MHz
Channel Bandwidth: 200 KHz
Modulation: GMSK
Output power: +30dBm +/- 2dB

Band PCS1900:

Tx Uplink: 1850.2 ~ 1909.8 MHz
Rx Downlink: 1930.2 ~ 1989.8 MHz
Channel Bandwidth: 200 KHz
Modulation: GMSK
Output power: +30dBm +/- 2dB
(+24 dBm +1/-3 dBm)

Band IMT UMTS 2100,WCDMA FDD:

Tx Uplink: 1922.4-1977.6 MHz
Rx Downlink: 2112-2167 MHz
Channel Bandwidth: 5 MHz
Modulation: QPSK/DQPSK
Output Power: +24 dBm +1/-3 dBm

Band CLR UMTS 850,WCDMA/FDD:

Tx Uplink: 826.4 ~ 846.6 MHz
Rx Downlink: 871.4 ~ 891.6 MHz
Channel Bandwidth: 5 MHz
Modulation: QPSK/DQPSK
Output Power: +24 dBm +1/-3 dBm

Limited Warranty

Respironics, Inc., a Philips company ("Philips Respironics") provides this non-transferable, limited warranty for DreamStation Cellular Modem ("Product") to the customer who originally purchased the Product directly from Philips Respironics.

What this Warranty Covers: Philips Respironics warrants each new Product will be free from defects in materials and workmanship and will perform in accordance with the Product specifications under normal and proper use and maintenance in accordance with applicable instructions, subject to the exclusions below.

How Long does this Warranty Last: Two (2) years from the longer of the date of shipment to the purchaser or date of setup by purchaser for the end user.

What this Warranty does not cover: This warranty does not apply to any software included with the Product as the software warranty is included in the software license. This warranty does not cover damage or injury whether to the Products, personal property, or persons caused by accident, misuse, abuse, Acts of God, water ingress, repair or alteration by anyone other than Philips Respironics or its authorized service center, failure to operate in accordance with the terms of the operating manual and instructions, lack of reasonable care, the discontinuance of a network (e.g. 2G, 3G, etc.) by a carrier (e.g. ATT, Verizon, etc.), or other defects not related to material or workmanship. This warranty is not transferable. If Philips Respironics finds that a Product returned for service or the issue raised is not covered under this limited warranty, Philips Respironics may charge an evaluation fee and return shipping.

What Philips Respironics will do: If a Product does not meet the warranty above in the first 90 days after the original shipment date, Philips Respironics will replace the device with a new Product. Thereafter, if a Product fails to conform to the warranties set forth above during the applicable warranty period, Philips Respironics will repair or replace the Product or refund the original purchase price, in Philips Respironics sole discretion. Philips Respironics may use new or remanufactured assemblies, components, and parts in repair and new or recertified refurbished devices for replacement. The balance of the original warranty period will apply to any Product or component of a Product repaired or replaced under this warranty.

Warranty Disclaimer; Limitation of Liability: EXCEPT AS SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY, PHILIPS RESPIRONICS MAKES NO WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, REGARDING THE PRODUCT OR ITS QUALITY OR PERFORMANCE. PHILIPS RESPIRONICS SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PHILIPS RESPIRONICS MAXIMUM LIABILITY UNDER THESE WARRANTIES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OR WILL PHILIPS RESPIRONICS BE LIABLE FOR ANY ECONOMIC LOSS, LOSS OF PROFITS, OVERHEAD, OR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Repair, replacement, or return of purchase price by Philips Respironics is the original purchaser's sole and exclusive remedy under this warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

How to get warranty support: Patients contact your local authorized Philips Respironics dealer and dealers contact Respironics, Inc. at:

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550
+1-724-387-4000

Uso previsto

O modem celular da DreamStation é projetado para uso com aparelhos terapêuticos Philips Respironics selecionados. Uma vez instalado, ele transfere automaticamente os dados entre o aparelho terapêutico e o software de aderência proprietário da Philips Respironics. O modem celular da DreamStation pode receber dados de oximetria e transferi-los para o aparelho terapêutico.

Conteúdo da embalagem

Modem celular da DreamStation

Advertências e precauções

Advertências

- Se você perceber qualquer mudança inexplicada no desempenho deste aparelho, se ele sofrer uma queda ou for manuseado inadequadamente, se água for derramada em seu gabinete ou se o gabinete estiver quebrado, interrompa o uso e entre em contato com a Philips Respironics para obter assistência.
- Reparos e ajustes devem ser realizados apenas por profissionais de assistência técnica autorizados pela Philips Respironics. Serviços de assistência não autorizados podem causar lesões, anular a garantia ou resultar em danos onerosos.
- Para reduzir o risco de lesão corporal e de danos ao equipamento, guarde e siga todas as instruções de segurança e de operação do produto.
- A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da Indústria em Saúde, dos EUA) recomenda que uma separação mínima de 15,2 cm seja mantida entre um telefone sem fio e um marca-passo para evitar uma possível interferência com o marca-passo. Nesse contexto, o modem celular da DreamStation deve ser considerado um telefone sem fio.
- Se você usa qualquer outro aparelho médico essencial, como um marca-passo, consulte o respectivo fabricante para determinar se a proximidade com nosso aparelho poderá causar interferências de RF. Seu médico talvez possa ajudá-lo a obter essa informação.
- Não use este produto em postos de gasolina, em depósitos de combustível, em fábricas de produtos químicos e em locais que contenham explosivos.
- Não use acessórios, peças destacáveis e materiais não descritos nas instruções de uso.

Precauções




- Desligue o aparelho terapêutico desconectando o cabo da fonte de alimentação da entrada de energia na parte traseira do aparelho antes de prosseguir com as instruções de instalação.
- Se o modem tiver sido exposto a temperaturas muito altas ou muito baixas, deixe-o ajustar-se à temperatura ambiente antes de iniciar o procedimento de instalação.
- Não toque nos pinos dos conectores. Esses conectores só deverão ser usados se procedimentos de precaução contra descarga eletrostática tiverem sido seguidos. Os procedimentos de precaução incluem métodos para evitar o acúmulo de carga eletrostática (por exemplo, ar-condicionado, umidificação, assoalhos condutores, roupas não sintéticas) por meio do descarregamento da eletricidade do corpo de uma pessoa na estrutura do equipamento ou do sistema, na terra ou em um objeto metálico grande e pela ligação ao equipamento, ao sistema ou à terra usando uma pulseira antiestática.


Importante! Consulte o manual do aparelho terapêutico para obter advertências e precauções adicionais.

Importante! Periodicamente, os aparelhos eletrônicos podem ser afetados por irregularidades nas fontes de alimentação elétricas e em outros

equipamentos elétricos. Para evitar interferências elétricas que possam afetar o desempenho do seu equipamento médico, mantenha sempre acessórios (fontes de alimentação, baterias etc.) e outros aparelhos elétricos (telefones, rádios etc.) longe do seu CPAP quando estiver usando o modem celular.

Símbolos


Símbolo	Definição
	Consulte as instruções anexas
	Este aparelho contém um transmissor de RF
IP22	Equipamento à prova de respingo
	Coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos conforme a Diretiva 2012/19/UE da Comunidade Europeia (CE)

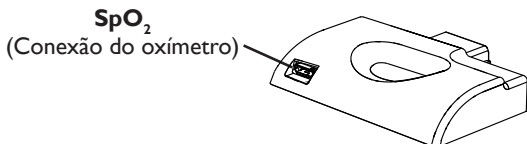

Como instalar o modem


Para que o modem funcione corretamente, ele precisa ser instalado em um aparelho terapêutico.

1. Certifique-se de que o aparelho terapêutico esteja desligado.
2. Abra a porta para acessórios do aparelho terapêutico.

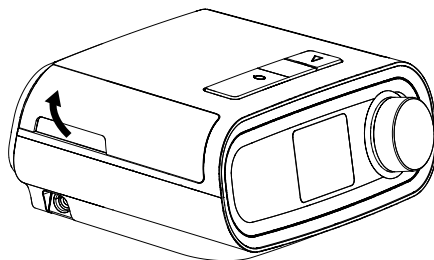


Abra a porta para acessórios

3. Insira o modem no compartimento para acessórios até que encaixe no lugar com um clique.

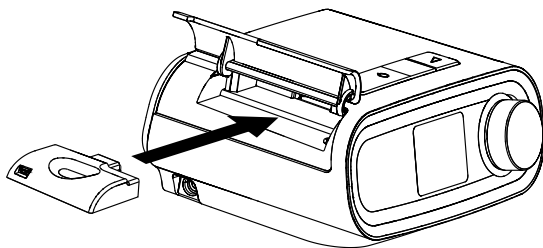

Insira o modem até que encaixe no lugar

4. Feche a porta para acessórios do aparelho terapêutico.

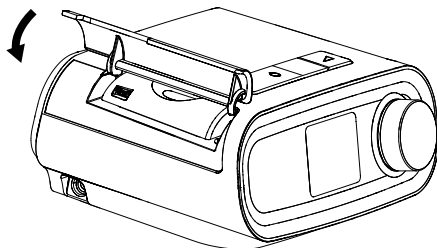

Feche a porta para acessórios

Nota: Depois de ligado, o modem poderá levar até 30 segundos para estar pronto para fazer uma chamada.

Importante! O modem realizará uma chamada automaticamente em até 5 minutos após a instalação se o insuflador estiver desligado e uma chamada manual não tiver sido completada com sucesso.


Como realizar uma chamada

Normalmente, o modem realizará uma chamada de maneira automática e carregará os dados de terapia em intervalos de tempo predeterminados pelo seu provedor. O modem não realizará nenhuma chamada enquanto o insuflador estiver ligado e o aparelho terapêutico estiver fornecendo a terapia.


Se instruído pelo provedor, você poderá realizar uma chamada manualmente ao navegar até o menu Meu Provedor no aparelho terapêutico e selecionar Carregar. O aparelho exibirá a tela Enviando e, em seguida, exibirá que o carregamento foi concluído.




Tela Meu provedor

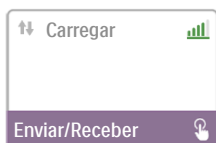

Tela Carregar

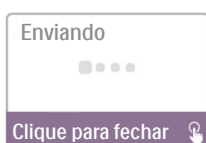

Tela Enviando

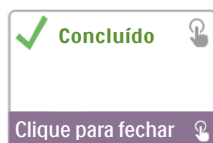

Tela Carregamento concluído

Nota: Quando você estiver próximo a um rádio-relógio, alto-falante ou outro aparelho eletrônico, é possível que um zumbido ocasional seja ouvido. Afaste o aparelho terapêutico e o modem do aparelho eletrônico para reduzir ou de eliminar esse ruído.

Ligar/desligar o modem


Caso necessário, você poderá desligar o modem temporariamente ao navegar até o menu Minhas configurações e selecionar Desligar modem. O modem não poderá realizar nenhuma chamada enquanto estiver desligado e um ícone de avião aparecerá na tela Carregar. Quando estiver pronto para ligar o modem novamente, navegue até o menu Minhas configurações e selecione Ligar modem.



Tela Minhas configurações



Ícone de modem desligado

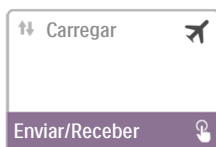

Tela Carregar quando o modem está desligado



Ícone de modem ligado

Mensagens de erro

Se uma tentativa de conexão ou de carregamento falhar, uma mensagem de erro será exibida na tela do aparelho terapêutico indicando o número do erro.



Exemplo de mensagem de erro


Número	Texto exibido	Significado	Ação
1-0 1-1	Problema de rede na operadora	Erro de conexão	Experimente interromper a alimentação do aparelho terapêutico desconectando o cabo da fonte de alimentação da entrada de energia na parte traseira do aparelho; aguarde 10 segundos e volte a conectar o cabo. Em seguida, experimente iniciar manualmente uma chamada navegando até o menu Meu provedor, no aparelho terapêutico, e selecionando "Carregar." Consulte a seção "Como realizar uma chamada" deste guia. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor. O provedor deverá verificar o software de aderência proprietário da Philips Respironics para obter informações adicionais.
1-2 1-3 1-4	Ligue novamente mais tarde		
2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5	Ligue novamente mais tarde		
		Erro de comunicação interna	Experimente iniciar manualmente uma chamada navegando até o menu Meu provedor no aparelho terapêutico e selecionando "Carregar." Consulte a seção "Como realizar uma chamada" deste guia. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor. O provedor deverá verificar o software de aderência proprietário da Philips Respironics para obter informações adicionais.

Número	Texto exibido	Significado	Ação
3-0	Ligar para o suporte do produto	Erro de configuração de software	Experimente iniciar manualmente uma chamada navegando até o menu Meu provedor no aparelho terapêutico e selecionando “Carregar.” Consulte a seção “Como realizar uma chamada” deste guia. Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor. O provedor deverá verificar o software de aderência proprietário da Philips Respironics para obter informações adicionais.
3-1	Verificar configuração Encore		
3-2	Ligue novamente mais tarde		
4-0 4-1 4-2 4-3	Serviço do modem necessário	Erro de configuração inválida do aparelho	Entre em contato com seu provedor. O provedor deverá verificar o software de aderência proprietário da Philips Respironics para obter informações adicionais.

Nota: O software de aderência de propriedade da Philips Respironics foi projetado pela Philips Respironics e deve ser usado por médicos e provedores de cuidados domiciliares.


Como remover o modem

1. Certifique-se de que o aparelho terapêutico esteja desligado.
2. Abra a porta para acessórios do aparelho terapêutico.

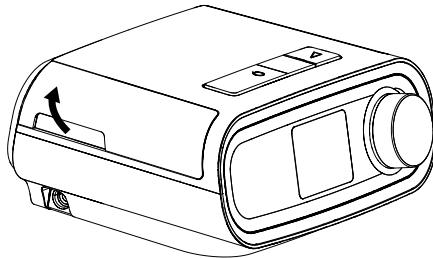

Abra a porta para acessórios

3. Puxe delicadamente o modem para fora do aparelho terapêutico.

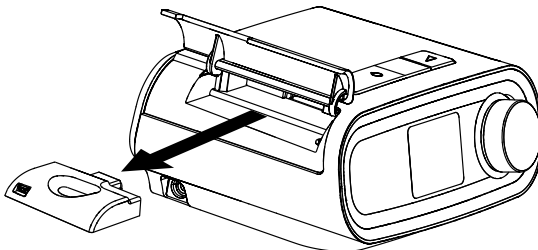

Remova o modem

4. Feche a porta para acessórios do aparelho terapêutico.

Informações de temperatura e de armazenamento

	Operação	Transporte e armazenamento
Temperatura:	5 - 35 °C	-20 - 60 °C
Umidade:	15% a 95% sem condensação	15% a 95% sem condensação

Descarte

Coleta separada para equipamentos elétricos e eletrônicos conforme a Diretiva 2012/19/UE da Comunidade Europeia (CE). Descarte este aparelho de acordo com as regulamentações locais.

Avisos adicionais

- Aviso:** As antenas usadas no transmissor devem estar instaladas a uma distância de pelo menos 30 cm de todas as pessoas e não devem ficar no mesmo local nem operar junto com qualquer outra antena ou transmissor.
- Aviso:** Para fins de identificação regulamentar, foi atribuído ao modem celular da DreamStation o número do modelo 200650C ou 100650C.
- Aviso:** O acessório do Modem celular não contém peças que possam ser reparadas pelos usuários.
- Aviso:** O modem celular não deve ser usado em aeronaves.
- Aviso:** O uso de acessórios não aprovados pelo fabricante original pode violar as suas diretrizes locais de exposição à RF e deve ser evitado.

Pelo presente, a Respirationics Inc. declara que este equipamento de rádio classe 1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no endereço da Internet a seguir:
<http://incenter.medical.philips.com/PMSPublic>

Suporte ao produto

Caso você tenha problemas com este equipamento ou precise de assistência para configurar, usar ou manter o equipamento, entre em contato com seu provedor de cuidados domiciliares ou com a Philips Respirationics nos telefones +1-800-345-6443 ou +1-724-387-4000.

Especificações

- O modem celular tem vida útil prevista de 5 anos.
- As operadoras locais podem não ter suporte a todas as bandas.
- Modo de funcionamento: Contínuo

Especificações de rádio

Banda DCS1800:

Tx Uplink: 1710 - 1785 MHz
Rx Downlink: 1805 - 1880 MHz
Largura de banda de canal: 200 KHz
Modulação: GMSK
Energia de saída: +30 dBm +/-2 dB

Banda PCS1900:

Tx Uplink: 1850,2 ~ 1909,8 MHz
Rx Downlink: 1930,2 ~ 1989,8 MHz
Largura de banda de canal: 200 KHz
Modulação: GMSK
Energia de saída: +30 dBm +/-2 dB
(+24 dBm +1/-3 dBm)

Banda IMT UMTS 2100,WCDMA FDD:

Tx Uplink: 1922,4 - 1977,6 MHz
Rx Downlink: 2112 - 2167 MHz
Largura de banda de canal: 5 MHz
Modulação: QPSK/DQPSK
Energia de saída: +24 dBm +1/-3 dBm

Banda CLR UMTS 850,WCDMA/FDD:

Tx Uplink: 826,4 ~ 846,6 MHz
Rx Downlink: 871,4 ~ 891,6 MHz
Largura de banda de canal: 5 MHz
Modulação: QPSK/DQPSK
Energia de saída: +24 dBm +1/-3 dBm

Garantia Limitada

Respironics, Inc., uma empresa Philips ("Philips Respironics") fornece esta garantia limitada e intransferível para o Modem celular da DreamStation ("Produto") ao cliente que adquiriu originalmente o Produto diretamente da Philips Respironics.

O que esta garantia cobre: A Philips Respironics garante que cada novo Produto estará isento de defeitos de material e mão de obra e funcionará de acordo com as especificações do Produto sob condições de uso e manutenção normais e adequadas, de acordo com as instruções aplicáveis, sujeito às exclusões abaixo.

Qual a duração desta garantia: Dois (2) anos a partir da data que ocorrer por último: a data de remessa ao comprador ou de instalação pelo comprador para o usuário final.

O que esta garantia não cobre: Esta garantia não se aplica a nenhum software incluso com o Produto, pois a garantia do software está inclusa na licença do software. Esta garantia não abrange danos ou lesões ocorridas em Produtos, propriedade pessoal ou pessoas causados por acidente, uso indevido, abuso, caso fortuito, entrada de água, reparo ou alteração por alguém não pertencente à Philips Respironics ou seu centro de serviço autorizado, incapacidade de operar em conformidade com os termos do manual de operação e das instruções, falta de cuidado adequado, descontinuação de uma rede (por exemplo, 2G, 3G etc.) por uma operadora (por exemplo, ATT, Verizon etc.) ou outros defeitos não relacionados a material ou mão de obra. Esta garantia é intransferível. Se a Philips Respironics considerar que um Produto enviado para manutenção ou o problema indicado não é coberto por esta garantia limitada, poderá cobrar uma taxa de avaliação e pela devolução.

O que a Philips Respironics fará: Se um Produto não atender à garantia acima nos primeiros 90 dias após a data original da remessa, a Philips Respironics substituirá o dispositivo por um novo Produto. Posteriormente, se um Produto não apresentar conformidade com as garantias estabelecidas acima durante o período de garantia aplicável, a Philips Respironics reparará ou substituirá o Produto ou reembolsará o preço de compra original, a critério exclusivo da Philips Respironics. A Philips Respironics pode usar conjuntos, componentes e peças novos ou remanufaturados para reparo e dispositivos novos ou reconicionados recertificados para substituição. O saldo do período de garantia original será aplicado a qualquer Produto ou componente de um Produto reparado ou substituído por esta garantia.

Isenção da garantia; limitação de responsabilidade: EXCETO CONFORME PREVISTO NESTA GARANTIA LIMITADA, A PHILIPS RESPIRONICS NÃO CONCEDE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ESTATUTÁRIA OU DE OUTRA FORMA, EM RELAÇÃO AO PRODUTO, SUA QUALIDADE OU SEU DESEMPENHO. A PHILIPS RESPIRONICS NEGA ESPECIFICAMENTE A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO E A GARANTIA IMPLÍCITA DE ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADO PROPÓSITO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA PHILIPS RESPIRONICS NOS TERMOS DESTAS GARANTIAS EXCEDERÁ O VALOR DE COMPRA ORIGINAL NEM A PHILIPS RESPIRONICS SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUALQUER PERDA ECONÔMICA, PERDA DE LUCROS, CUSTOS INDIRETOS OU DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. O reparo, a substituição ou a devolução do valor de compra pela Philips Respironics é a única e exclusiva reparação do comprador original de acordo com esta garantia.

Esta garantia concede a você direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que variam de um estado para outro. Alguns estados não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou decorrentes, ou seja, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

Como obter assistência em relação à garantia: Os pacientes devem entrar em contato com o revendedor local autorizado da Philips Respironics, e os revendedores devem entrar em contato com a Respironics, Inc. no endereço:

1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, EUA
+1-724-387-4000

REF 1135419